

Sleepnet®

MiniMe® 2

Varustettu AIR^ogel[®] pehmusteteknologialla

Yhteistyössä johtavien lastensairaaloiden kanssa Sleepnet tarjoaa nyt MiniMe 2 -maskin neljänä kokona ja uudet pehmeät viiden säätöpisteen pääremmit kahtena kokona. FDA:n hyväksymä 2–12-vuotiaille lapsille tarkoitettu Sleepnetin MiniMe 2 on patentoitu muotoiltava pediatrien maski, joka sisältää patentoidun AIR^ogel[®]-teknologiamme. Uusi MiniMe 2 tarjoaa pienimmille potilaillesi täydellisen istuvuuden ja mukavuuden.

Pediatrien maskien seuraava sukupolvi

AIR^ogel[®]

Maksimaalinen mukavuus, minimaalinen paino. Patentoidun AIR^ogel[®]-teknologian ansiosta MiniMe 2 -maski on markkinoiden pehmeimmin istuva maski.



Touchless Spacebar™

Ainutlaatuinen muotoilu eliminoi kosketuksen potilaan otsaan.

Koon ilmaisin

Sekä ilma-aukollisia että ilma-aukottomia on neljää kokoa: **XS, S, M, L**

Custom Fit -teknologia

Maski voidaan helposti muotoilla yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi. **Taivuta, Sovita, nohda**

Kehittynyt pehmusteteknologia


Ergonominen pehmusteteknologiamme tuottaa tehokkaan tiivyyden, joka takaa miellyttävimmän istuvuuden.

360° pyörivä kulmakappale

Letkun optimaalista paikalleen asettamista ja helpompaa liikkuvuutta varten.

Saatavana ilma-aukollisina ja ilma-aukottomina malleina

CPAP-, BiPAP- ja ventilaatiohoito lapsilla.

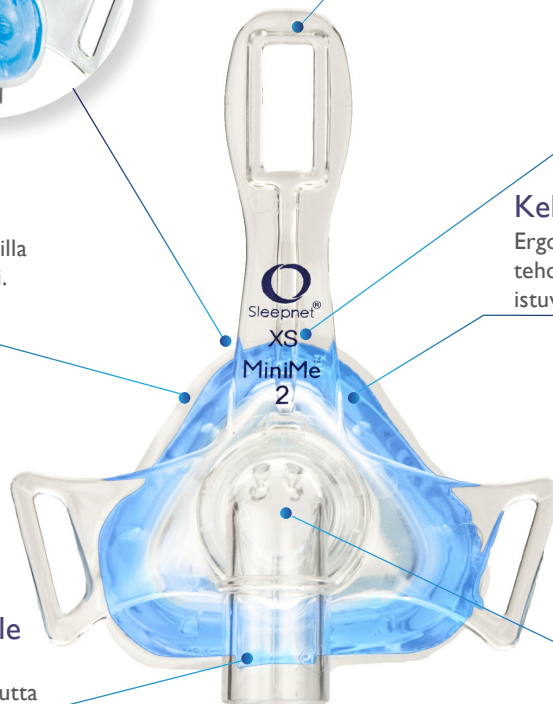

Made in the USA of US and imported parts

Mikä tekee MiniMe 2 -maskista erilaisen?

AIR^ogel[®] Kehittynyt pehmusteteknologia

- MiniMe 2 sisältää pehmeimmän ja kevyimmän geeliteknologiamme, joka tarjoaa ylivoimaisen mukavuuden ja tiiviyn kaikille.
- Custom Fit -teknologia – ainutlaatuinen pehmeäkuorinen muotoiltava maski, joka mahdollistaa optimaalisen joustavuuden, istuvuuden ja mukavuuden.
- Maskia on saatavana neljänä kokona.
- Uusi yksinkertainen ja hengittävä pääremmi, jossa on viisi säätöpistettä, saatavana kahtena kokona.

Patentoitu AIR^ogel[®]-teknologiamme tarjoaa ergonomisen muotoilun ja ylellisen tunnun ja vähentää painetta säilyttäen samalla tehokkaan tiiviyn.



Custom Fit -teknologia



TAIVUTA



SOVITA



UNOHDA

Pääremmeillä varustettujen MiniMe 2 -maskien tekniset tiedot:

Tuote-numero	Tyyppi	Pääremmin koko	Koko	Paino	Tyhjä tila	Mitat
60216	Vented	XSmall/Small	XS	33.5 g	20 ml	6,7 x 7,9 x 10 cm (S x L x K)
60217	Vented	XSmall/Small	S	31.6 g	25 ml	6,7 x 7,9 x 10 cm (S x L x K)
60218	Vented	Medium/Large	M	43.2 g	37 ml	7 x 7,9 x 10,5 cm (S x L x K)
60221	Vented	Medium/Large	L	40.3 g	40 ml	7 x 7,9 x 10,5 cm (S x L x K)
60256	Non-Vented	XSmall/Small	XS	33.5 g	55 ml	6,7 x 7,9 x 10 cm (S x L x K)
60257	Non-Vented	XSmall/Small	S	31.6 g	60 ml	6,7 x 7,9 x 10 cm (S x L x K)
60258	Non-Vented	Medium/Large	M	43.2 g	72 ml	7 x 7,9 x 10,5 cm (S x L x K)
60261	Non-Vented	Medium/Large	L	40.3 g	75 ml	7 x 7,9 x 10,5 cm (S x L x K)
55055	Headgear	XSmall/Small	-	-	-	-
55056	Headgear	Medium/Large	-	-	-	-

MiniMe 2:n pääremmin kokotaulukko:

Pään koko – cm		35.5	38	41	43	46	48	51	53.5	56	58.5	61	63.5
Pään koko – tuuma		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55055	XSmall/Small Headgear												
55056	Medium/Large Headgear												

Pään koon määrittämiseksi mittaa päänympärys juuri kulmakarvojen yläpuolelta aivan kuin hikinauhaa varten. Valitse sopivin koko.

	- Suositeltu tiukkuus
	- Sopii joissakin tapauksissa

Kaksi sukupolvea pediatria maskeja:



Ota yhteyttä jo tänään.

Voit tehdä tilauksen soittamalla valtuutetulle jälleenmyyjälle.



Endotec Oy
Sinikalliontie 6
02630 Espoo, Finland

Tel. +358 9 274 5110
info@endotec.fi
www.endotec.fi

